


JM-Ⅲ型下腹部牵开器 用户指南

JM-Ⅲ型下腹部牵开器

JM-III STRONG RETRACTOR FOR HYPOGASTRIC OPERATION

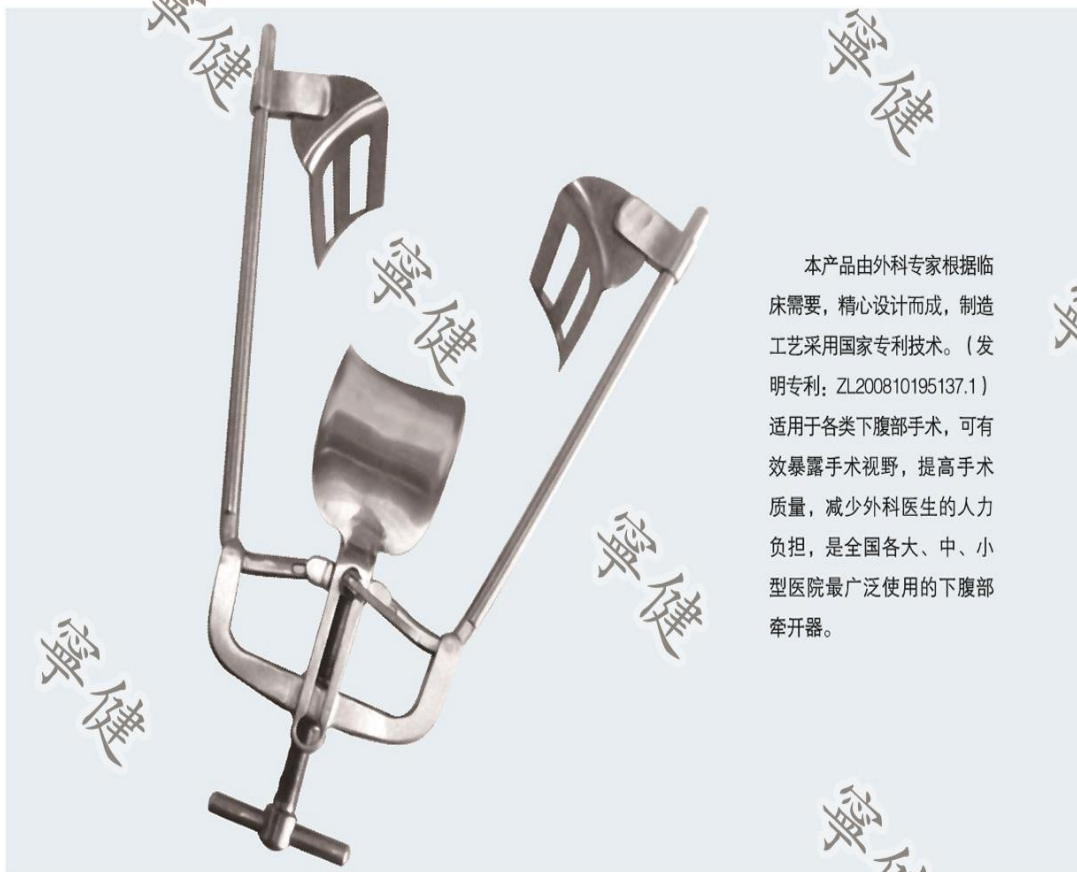

本产品由外科专家根据临床需要，精心设计而成，制造工艺采用国家专利技术。（发明专利：ZL200810195137.1）适用于各类下腹部手术，可有效暴露手术视野，提高手术质量，减少外科医生的人力负担，是全国各大、中、小型医院最广泛使用的下腹部牵开器。

• 寧健 • www.njningjian.com


寧健

JM-III 型下腹部牵开器

牵开腹壁时JM-III型下腹部牵开器总装示范

部件名称:

- 1、手柄装置
- 2、U型变幅杆
- 3、紧固装置
- 4、钩板

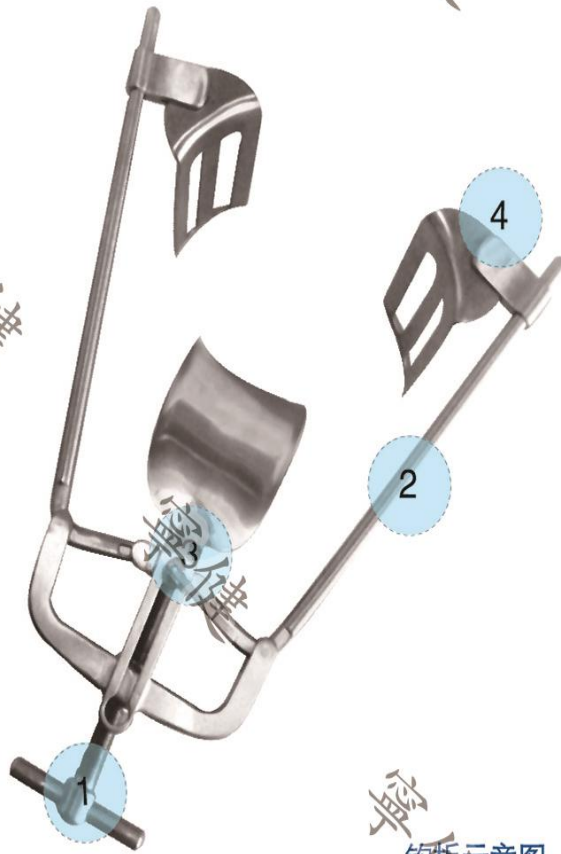

钩板示意图:



· 寧健 ·

JM-III型下腹部牵开器 用户指南

安装步骤

▲ 将U型变幅杆直接放在患者需要手术部位切口之上。

▲ 根据手术切口需求，选相应的钩板分别套在U型变幅杆上，并将钩板完全深入手术切口。

▲ 旋转手柄装置，达到术野满足手术需要为止。



· 寧健 ·

寧健

特别声明：

本产品专利（ZL200810195137.1）所有权人为南京宁健医学研究有限公司，仿冒必究！

寧健

寧健

寧健

寧健

寧健

销售服务

设计及制造：

南京宁健医学研究有限公司

地址：南京市建邺区江东中路186-1号宏普捷座1502室

电话：025-86215647、86215648、86215651

传真：025-86215649

手机：13305158814 (0)13705266814

邮编：210019

网址：www.njningjian.com

邮箱：njningjian@163.com

寧健

寧健

寧健

· 寧健 ·

寧健